

Mode d'emploi abrégé – Mesure de la glycémie avec BG★STAR®



- ★ **Sans codage**
- ★ **Volume d'échantillon** – 0,5 µl
- ★ **Durée du test** – 6 secondes*
- ★ **Mémoire** – 1.865 mesures

*Durée moyenne du test

Ces instructions sont purement indicatives. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi complet avant la première utilisation du lecteur BGStar®.

1



Insérez la bandelette

- ★ Utilisez uniquement des bandelettes BGStar®. Insérez la bandelette dans la fente d'insertion avec les barres de contact orientées vers le haut. Le lecteur est automatiquement activé.
- ★ **ATTENTION** : Pour garantir des résultats précis, lavez-vous les mains au savon et à l'eau tiède et séchez-les avant chaque test.

2



Site de piqûre

- ★ Suivez les instructions pour la préparation de l'autopiqueur, imprimées sur l'emballage du lecteur BGStar® ou au dos.
- ★ Appuyez l'autopiqueur contre le site à piquer.
- ★ Appuyez sur le bouton déclencheur. Pour prélever le sang à un autre endroit du corps, veuillez consulter le mode d'emploi.

3



Mettez la bandelette en contact avec l'échantillon de sang

- ★ La bandelette absorbe le sang dans la zone d'échantillon.

4



Retirez la bandelette de l'échantillon de sang quand vous entendez le bip

- ★ Votre lecteur émet un bip lorsque la zone d'échantillon de la bandelette ne peut plus absorber de sang.
- ★ La barre de progression et l'affichage «1-2-3» montrent que le lecteur calcule vos résultats.


5




Étapes finales

- ★ Votre test est terminé quand votre résultat de glycémie avec l'heure et la date s'affiche à l'écran. Appuyez sur le bouton «Confirmer» pour confirmer l'indicateur de repas, qui cesse alors de clignoter.
- ★ Retirez la bandelette usagée. Le lecteur est automatiquement désactivé. Retirez l'embout de l'autopiqueur et remettez le capuchon de la lancette.
- ★ Retirez la lancette usagée et éliminez la correctement.


Préparation de l'autopiqueur

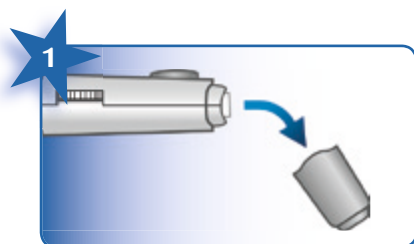


Retirez l'embout de l'autopiqueur.

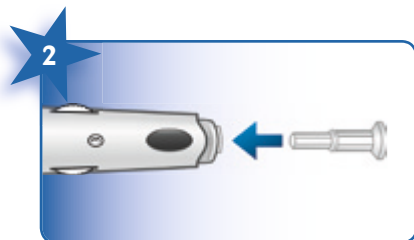

Insérez une nouvelle lancette à fond dans le support de lancettes.

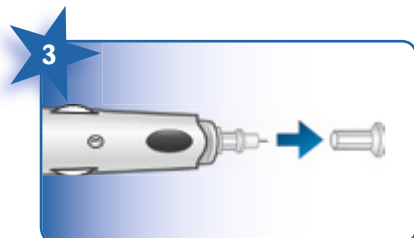


Détachez le capuchon de la lancette en tournant.

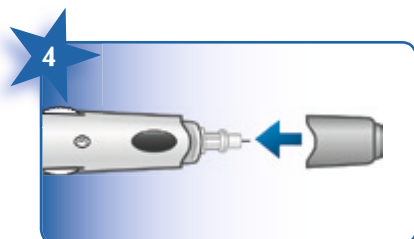

Remettez l'embout de l'autopiqueur.



Réglez la profondeur de piqûre.

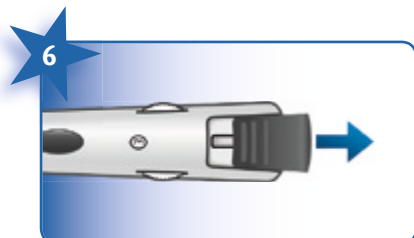

Tirez le bouton d'armement jusqu'à ce qu'il émette un clic.
Pour piquer, libérer la lancette en appuyant sur le bouton déclencheur.



Diabetes-care line

0800 87 0800

Gratuit
en 3 langues
7 jours sur 7
réponse dans les 24 heures

sanofi-aventis (suisse) sa
3, route de Montfleury C.P. 777
CH-1214 Vernier
www.sanofi.ch

SANOFI DIABETES 